



I PIANI DI LAVORO IN ACCIAIO PORCELLANATO SONO PROVVISI DI RISVOLTI PERIMETRALI ANTIDEBORDANTI⁽¹⁾ STAMPATI E RIGAVATI DA SPECIALE ACCIAIO DECARBURATO SPESSORE 12/10, PORCELLANATI CON SMALTI ACIDO RESISTENTI DI CLASSE "AA" IN CONFORMITÀ ALLE NORME DEL SETTORE E SOTTOPOSTI A DOPPIA COTTURA IN FORNI SPECIALI A 820° C.

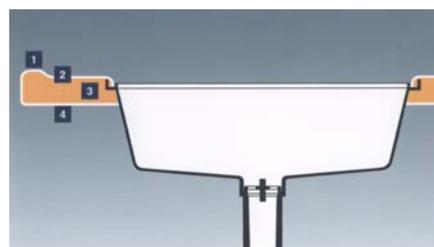
LA SMALTATURA⁽²⁾ GARANTISCE UN'OTTIMA RESISTENZA A TUTTI I COMUNI AGENTI CHIMICI.

OLI, GRASSI, IODIO E MACCHIE DI DIVERSA NATURA POSSONO ESSERE TOLTI CON SEMPLICI PRODOTTI DETERGENTI.

SOLVENTI E POLVERI ABRASIVE NON PENETRANO, NON RIGANO E NON ALTERANO LA SUPERFICIE.



SUPPORTO INTERNO CON FUNZIONE DI IRRIGIDIMENTO ED ANTIROMBO, REALIZZATO CON INIEZIONE AD ALTA PRESSIONE DI POLIURETANO⁽³⁾. CONTRO PLACCATURA IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATA A CALDO⁽⁴⁾.



L'ANTIDEBORDANTE DEI PIANI DI LAVORO MONOLITICI ASEPSI LABSTEEL[®] GARANTISCE I SEGUENTI VALORI DI CONTENIMENTO DI LIQUIDI VERSATI ACCIDENTALMENTE:

PIANO DIM. CM. 120 x 75 LITRI 6

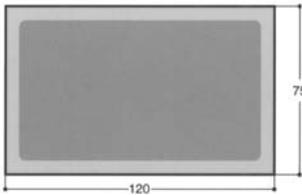
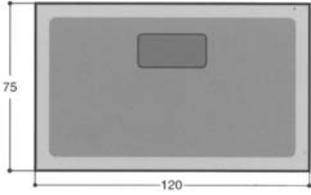
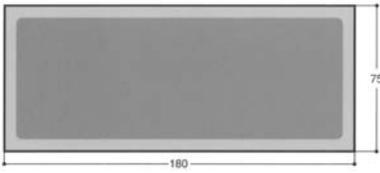
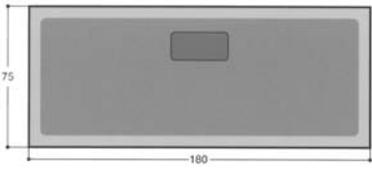
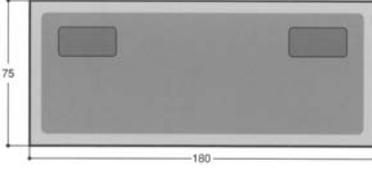
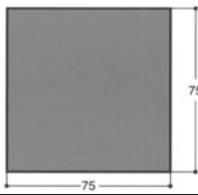
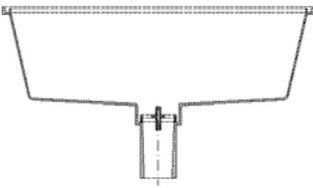
PIANO DIM. CM. 180 x 75 LITRI 9

STANDARDS	
PORCELLANATURA	UNI EN 14431
SUPERFICIE	ISO 8289
RESISTENZA ALL'URTO	ISO 4532
DUREZZA	EN 101
ACIDO CITRICO	ISO 2722
ACIDO NITRICO	ISO 2722
ACIDO SOLFORICO	ISO 8290
POROSITA'	ISO 8289
SHOCK TERMICO	DIN 51167
ABRASIONE	NEN-EN-ISO 15695
RAGGI UVA	ASTM C 538
CORROSIONE	ISO 9227



- ✓ RESISTENTE AGLI ACIDI
- ✓ DUREVOLE E RESISTENTE AI GRAFFI
- ✓ SUPERFICIE NON POROSA
- ✓ ESTREMA RESISTENZA ALL'USURA
- ✓ FACILE DA PULIRE E DECONTAMINARE
- ✓ INCOMBUSTIBILE
- ✓ NON CONDUTTIVO
- ✓ RESISTENTE AI RAGGI UV
- ✓ RESISTENTE ALL'INVECCHIAMENTO
- ✓ PRIVO DI SOLVENTI E NON TOSSICO

ASEPSI LABSTEEL®

PIANI	CODICE	DIMENSIONI MM.	KG./CAD.
	054	PIANO ASEPSI LABSTEEL® 750 x 1200 MM. BORDO 44 MM.	23
	054/A	PIANO ASEPSI LABSTEEL® 750 x 1200 MM. BORDO 44 MM. N° 1 VASCHETTA	23
	055	PIANO ASEPSI LABSTEEL® 750 x 1800 MM. BORDO 44 MM.	35
	055/A	PIANO ASEPSI LABSTEEL® 750 x 1800 MM. BORDO 44 MM. N° 1 VASCHETTA	35
	055/B	PIANO ASEPSI LABSTEEL® 750 x 1800 MM. BORDO 44 MM. N° 2 VASCHE	35
	937	PIANO ASEPSI LABSTEEL® 750 x 750 MM. BORDO 44 MM.	12
	45/AB	VASCHETTA POLIPROPILENE 380 x 130 MM.	0,2
COLORI	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> GRIGIO RAL 7035 </div>		